

MG4800


DINAMÓMETRO DE MANO



Fácil reemplazo de muelles



Maletín de transporte

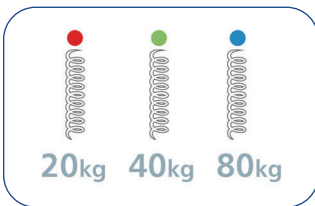

Juego de muelles

El dinamómetro de mango MG4800 está especialmente diseñado para la rehabilitación y evaluación del brazo. Es una gran herramienta para terapeutas y entrenadores de rehabilitación para ayudar a fortalecer y entrenar los músculos de la mano y el brazo.

El dinamómetro se puede ajustar a diferentes niveles de resistencia para diferentes personas. Hay tres modos disponibles, que miden la fuerza de agarre máxima, la fuerza de agarre promedio o el número de repeticiones que cumplen con la fuerza de agarre mínima seleccionada.

Funciones

- Fuerza de agarre media
- Fuerza de agarre máxima
- Modo conteo

Características

Pantalla	LCD de 0,5" con 4 dígitos
Capacidad	80 kg (muelle azul), 40 kg (muelle verde), 20 kg (muelle rojo)
División	100 g
Dimensiones totales	110 x 212 x 55 mm
Amplitud de agarre	64 mm
Alimentación	Batería de litio recargable (mediante cable USB) Carga completa en 2,5h.
Peso	0,33 kg

