


F7305W/IV – F7320W/IV

**PIASTRE MONOUSO IN TNT PREGELATE PER ELETTROCHIRURGIA
DISPOSABLE NON-WOVEN GROUND PADS WITH SOLID GEL FOR ELECTROSURGERY**

F7305W/IV

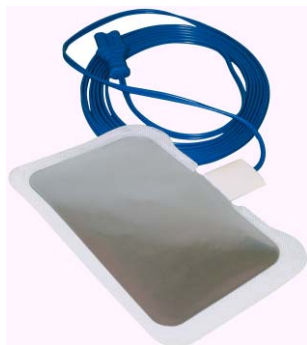

F7320W/IV



Le piastre monouso neutre per elettrochirurgia FIAB con cavo di collegamento (terminale tipo Valleylab) hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Prodotto senza lattice.

FIAB disposable ground pads with solid gel for electrosurgery with connection cable (Valleylab type) have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. The product is Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO – MODEL	F7305W/IV	F7320W/IV
MATERIALI – MATERIALS	supporto/support: TNT / Non Woven gel: Hydrogel	
DIMENSIONI – DIMENSIONS	150 x 108 mm	
SUPERFICIE TOTALE TOTAL SURFACE	162 cm ²	
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	114 cm ²	107 cm ²
ATTACCO CONNECTOR	Universale, terminale tipo Valleylab. Piastra non Rem <i>Universal, Valleylab type connection. Non Rem type devices</i>	Universale, terminale tipo Valleylab. Piastra Rem <i>Universal, Valleylab type connection. Rem type devices</i>
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	300 cm	
IMPEDENZA A 500 kHz IMPEDANCE 500 kHz	<14 Ohm	
MAX. TEMP:	<3,5 C° @ 700 mA	
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device</i>	
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1	

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di alluminio e PE – non sterile <i>Singly packaged in sealed aluminium with PE pouch – not sterile</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	25 pezzi in scatola di cartone <i>25 pcs in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +30° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: +5°C ÷ +30° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA EXPIRY	Riportata sulla confezione - 36 mesi dalla data di produzione <i>Printed on packaging - 36 months from production date</i>

52501120BR4H