


ELETTRODI MONOUSO STERILI PER ELETTROCHIRURGIA ELECTROSURGERY STERILE DISPOSABLE ELECTRODES

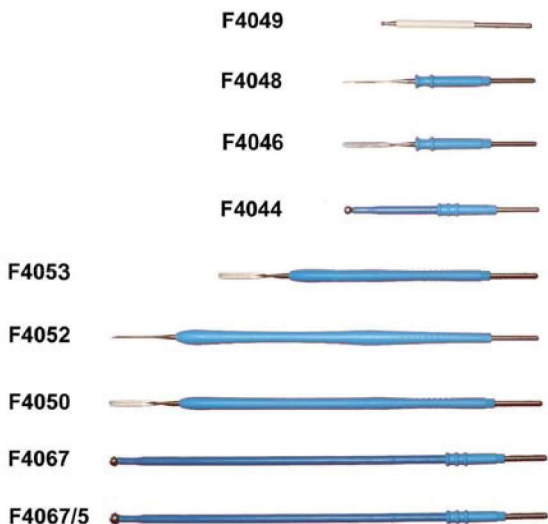

Gli elettrodi per elettrochirurgia FIAB possiedono alcune caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante le pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'utilizzo di materiali inossidabili e dall'accoppiamento con la protezione anti shock in plastica ad alta resistenza. Il sistema di bloccaggio esagonale impedisce la rotazione dell'elettrodo durante l'utilizzo. Sono disponibili diversi modelli per l'utilizzo in ogni pratica elettrochirurgica. Il prodotto è senza lattice.

FIAB active electrosurgical electrodes have features that make them absolutely reliable in electrosurgery. Product's safety is guaranteed by the use of inoxidizable materials coupling and by with anti-shock protection moulded with high resistance plastic. The hexagonal blocking system prevent the electrode from rotating during use. Many models are available for different electrosurgical procedures. Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	F4046	F4053	F4050
PUNTA TIP	LAMA - BLADE	LAMA - BLADE	LAMA LUNGA LONG BLADE
DIMENSIONI – DIMENSIONS	L = 70 mm	L = 100 mm	L = 153 mm
SPESSORE LAMA BLADE THICKNESS	0,5 mm		
LARGHEZZA LAMA BLADE WIDTH	2,3 mm		
MODELLO MODEL	F4049**	F4044	F4052
PUNTA TIP	PALLINA - BALL (Ø 2 mm)	PALLINA - BALL (Ø 4 mm)	AGO LUNGO LONG NEEDLE (Ø 0,75 mm)
DIMENSIONI – DIMENSIONS	L = 54 mm	L = 70 mm	L = 152 mm
MODELLO MODEL	F4048	F4067	F4067/5
PUNTA TIP	AGO - NEEDLE (Ø 0,65 mm)	PALLINA LUNGA LONG BALL (Ø 4 mm)	PALLINA LUNGA LONG BALL (Ø 5 mm)
DIMENSIONI – DIMENSIONS	L = 70 mm	L = 156 mm	L = 157 mm
MATERIALE ELETTRODO ELECTRODE MATERIAL	ACCIAIO INOX AISI STAINLESS STEEL		
ISOLAMENTO INSULATION	Materiale plastico Plastic material		
COMPATIBILITA' CON I MANIPOLI COMPATIBILITY WITH PENCILS	Tutti i manipoli con attacco universale 2,38 mm (3/32") All pencils with universal connection 2,38 mm (3/32")		
STERILIZZAZIONE STERILISATION	Ossido di Etilene EO gas		
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifi. Dispositivo medico in classe IIB Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIB medical device		

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene
CONFEZIONE VENDITA SALE PACKAGING	24 pezzi in scatola di cartone 24 pieces in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0 ÷ +50 °C – Umidità relativa: 20 ÷ 80% Temperature 0 ÷ +50 °C - Relative humidity: 20 ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	4 anni dalla data di produzione se conservati correttamente 4 years from production date if correctly stored

**senza attacco esagonale / without hexagonal blocking system